

Graviditetstest

Rask Deteksjon

- Over 99 % nøyaktig fra dagen for din forventede menstruasjon.
- **Les dette pakningsvedlegget nøye før du tar en test.**

1 Før du begynner

Det kan være nyttig å ha en klokke tilgjengelig når du utfører testen.

Du kan teste når som helst på dagen fra den dagen du forventer menstruasjonen.



2 Ta testen

Når du er klar til å teste, fjerner du foliepakningen og tar av hetten. Bruk testpinnen med én gang.

Du kan teste direkte i urinstrømmen **eller** i en urinprøve tatt i en ren, tørr beholder.

- Sørg for å holde fargeendringsspissen pekende nedover i urinstrømmen **eller** i den innsamlede urinprøven din, som vist, i **5 sekunder**.
- Fargeendringsspissen vil umiddelbart bli rosa for å vise at urinen blir absorbert. **Du må fortsette å holde fargeendringsspissen i urinen i 5 sekunder.**

- Fortsett å holde fargeendringsspissen pekende nedover eller legg testpinnen flatt helt til du er klar til å lese av resultatet og en blå strek har dukket opp i kontrollvindu.



Urinstrøm **ELLER** Innsamlet prøve

- Du kan godt sette på hetten igjen.
- Hvis fargeendringsspissen ikke blir helt rosa, se spørsmål 5.

3

MINUTTER

VENT I 3 MINUTTER. Når testen begynner å virke vil du se at blå strek(er) begynner å utvikle seg.

3 Avles resultatet ditt


Du kan lese av resultatet ditt i resultatvinduet.

En blå strek må vises i kontrollvindu når du avles resultatet. Denne streken viser at testen har virket.

Et «Gravid»-resultat kan vises etter 1 minutt når du tester fra den dagen menstruasjonen uteble (som er dagen etter du forventet menstruasjonen).

Du bør vente i 3 minutter på å bekrefte et «Ikke gravid»-resultat (se spørsmål 8).

Hvis du ikke ser en blå strek i kontrollvindu har ikke testen virket (se spørsmål 6).

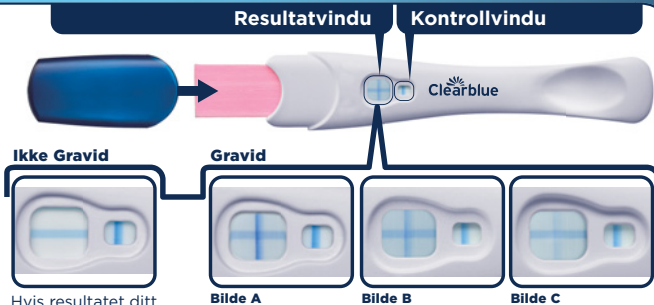

Hvis resultatet ditt er «**Ikke Gravid**», kan du se spørsmål 10.

- Hvis resultatet ditt er «**Gravid**», kan du se spørsmål 11.
- Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt, kan du se spørsmål 7.

Det har ikke noe å si om én av strekene som utgjør «+»-symbolet er lysere eller mørkere enn den andre, resultatet er «Gravid».

VIKTIG! Les av resultatet ditt innen **10 minutter** etter at du tok testen. Se bort fra alle endringer av resultatet ditt etter dette tidspunktet.

Spørsmål og svar

1 Hvor nøyaktig er Clearblue?

Clearblue er mer enn 99 % nøyaktig i laboratorietester når den brukes fra den dagen du forventer menstruasjonen.

2 Hvordan fungerer Clearblue?

Når du er gravid produserer kroppen din graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin). Mengden av hCG i kroppen din øker i tidlige stadier av graviditeten. Clearblue Rask Deteksjon kan detektere små mengder av dette hormonet i urinen din (følsomheten til denne testen er på 25 mIU/ml).

3 Jeg er ikke sikker på når jeg forventer min neste menstruasjon. Hvordan vet jeg at jeg utfører testen til riktig tid?

For å finne ut når du forventer å få menstruasjon, kan du beregne hvor lang syklusen din vanligvis er ved å telle antall dager fra den første dagen av menstruasjon til dagen for neste menstruasjon starter.

Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du beregne på grunnlag av den lengste syklusen du har hatt de siste månedene før du tester.

Hvis resultatet er «Ikke gravid» og du fortsatt mistenker at du er gravid, kan du se spørsmål 10.

4 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?

- Les alltid produsentens instruksjoner for ethvert legemiddel du tar før du utfører testen.
- Fertilitetspreparater som inneholder hCG kan føre til misvisende resultater (disse fertilitetspreparatene gis vanligvis ved injeksjon, og testing for raskt etter administrasjon kan gi et falskt «Gravid»-resultat).
- Andre fertilitetsbehandlinger (som klomifensitrat, smertelindende og hormonelle prevensjonsmidler (f.eks. p-piller) skal ikke påvirke resultatet.
- Hvis du nylig avsluttet bruken av hormonell prevensjon eller bruker fertilitetsbehandling som klomifensitrat kan menstruasjonen din være uregelmessig og føre til at du tester for tidlig.
- Hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ikke ble fullført) kan du få et falskt «Gravid»-resultat.
- Svangerskap utenfor livmoren, cyster på eggstokkene, menopause og visse svært sjeldne medisinske tilstander kan gi misvisende resultater.
- Hvis du fikk et «Gravid»-resultat er det mulig at du senere vil finne ut at du ikke er gravid på grunn av naturlig svangerskapsavbrudd som kan finne sted i tidlige stadier. Hvis du fikk uventede resultater bør du drøfte dem med legen din.

5 Jeg har brukt graviditetstesten, men fargeendringsspissen har ikke blitt helt rosa. Hva skal jeg gjøre?

Hvis fargeendringsspissen ikke har blitt helt rosa kan det være at du ikke har påført nok urin. Testen har virket hvis den blå streken i kontrollvinduet vises innen 10 minutter etter du har tatt testen. Hvis ingen blå strek har kommet til syne i kontrollvinduet innen 10 minutter etter du tok testen, kan du se spørsmål 6.

6 Jeg har brukt graviditetstesten, men det har ikke dukket opp en blå strek i kontrollvinduet. Hva skal jeg gjøre?

Testen virket ikke hvis det ikke er noen blå strek i kontrollvinduet innen 10 minutter etter du har tatt testen. Dette kan skyldes at:

- Fargeendringsspissen ble ikke holdt pekende nedover eller testen ble ikke lagt flatt etter at urin ble påført.
- For mye eller for lite urin ble brukt. **Du må ta prøven i 5 sekunder.**

Du bør teste igjen ved hjelp av en ny testpinne mens du følger instruksjonene nøye. Du kan ta en urinprøve i en ren, tørr beholder og bare plassere fargeendringsspissen i urinen i 5 sekunder.

7 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?

- For at resultatet ditt skal være «Gravid» må det være en blå strek i kontrollvinduet og et «+»-symbol i resultatvinduet innen 10 minutter etter at testen ble utført.

Visningen av «+»-symbolet i resultatvinduet kan variere, men strekene som skaper «+»-symbolet og streken i kontrollvinduet skal ha lignende bredde (se bilde A-C).

Bilde A

Det er mer sannsynlig at dette skjer når du er gravid og du tester mer enn noen dager etter forventet menstruasjon, da hCG-nivåene er høyere.

Bilde B

Dette er ikke uvanlig når du er gravid og du tester på eller rundt dagen for forventet menstruasjon, da hCG-nivåene fortsatt er relativt lave.

Bilde C

Selv om strekene er lyse, angir dette et «Gravid»-resultat. Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt skal du vente i minst 3 dager før du tester igjen, og følge instruksjonene nøye.

- For at resultatet ditt skal være «Ikke gravid» må det være en blå strek i kontrollvinduet og et «-»-symbol (minus) i resultatvinduet innen 10 minutter etter at testen ble utført. Hvis resultatet ditt er «Ikke gravid» og du fortsatt mistenker at du er gravid, kan du se spørsmål 10.

8 Når kan jeg lese av resultatet?

Et «Gravid»-resultat kan vises så raskt som etter 1 minutt når du tester fra den dagen menstruasjonen uteble (som er dagen etter din forventede menstruasjon). Forsikre deg om at en blå strek er til stede i kontrollvinduet før du leser av resultatet. Du må vente i 3 minutter for å bekrefte et «Ikke gravid»-resultat. Hvis ingen blå strek har kommet til syne i kontrollvinduet innen **10 minutter**, har ikke testen virket (se spørsmål 6).

9 Hvor lenge forblir resultatet der?

Resultatet kan leses av når det har gått mellom 3 og 10 minutter. Etter 10 minutter skal du se bort fra enhver endring av resultatene dine.

10 Testen viser at jeg er «Ikke gravid». Hva skal jeg gjøre?

Du er kanskje ikke gravid, eller nivået av graviditetshormon er kanskje ikke høyt nok til å påvises, eller du har feilberegnet dagen for forventet menstruasjon.

- Hvis du testet tidlig kan du teste igjen når du forventer menstruasjonen.
- Hvis menstruasjonen din er forsinket, kan du teste igjen om 3 dager. Hvis denne testen viser «Ikke gravid»-resultat og du fortsatt ikke har fått menstruasjon, bør du ta kontakt med legen din.

11 Testen min sier at jeg er «Gravid». Hva skal jeg gjøre?

Hvis testen viser at du er gravid, bør du ta kontakt med legen din for råd om hvordan du skal gå frem videre.

www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Din samtale vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

800 10 218

Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Vennligst oppgi partinummeret fra produktforpakningen.

For veien videre, informasjon og generelle råd knyttet til spørsmål om graviditet, kan du besøke nettstedet vårt: www.clearblue.com

	Producent		Må ikke brukes om igjen
	Partikode		Medisinsk enhet til <i>in vitro</i> -diagnostisering
	Holdbarhetsdato		Temperaturgrense 2-30 °C

Til selvtesting hjemme.

Kun til *in vitro*-diagnostisering.

Ikke til innvortes bruk.

Må ikke brukes om igjen.

Oppbevares utligjenlig for barn.

Oppbevares mellom 2 °C og 30 °C. 0843

La den nå romtemperatur i 30

minutter før testing hvis den

oppbevares i kjøleskap.

Ikke bruk hvis foliepakningen er

skadet.

Må ikke brukes etter

holdbarhetsdatoen.

Kast med vanlig husholdningsavfall.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.
Clearblue er et varemærke for SPD.
© 2017 SPD. Med enerett.

AW-2300445.01 02-2017



0843