

Clearblue®

Graviditetstest

Ekstra Tidlig

- Over 99 % nøyaktig fra den dagen du forventer menstruasjonen.
- **Les dette pakningsvedlegget nøye før du tar en test.**

1 Når skal du teste

Hette Fargeendringsspiss



- Test opptil 6 dager før uteblitt menstruasjon, som er 5 dager før forventet menstruasjon.
- Hvis du tester før du forventer menstruasjon, skal du bruke dagens første urin. Ellers kan du teste når som helst på dagen.
- Ikke drikk mye væske før du tester.

2 Ta testen

A



URINSTRØM

Du må fortsette å holde fargeendringsspissen i urinen i hele 5 sekunder.

- Fjern folien og ta av hetten.
Bruk testpinnen med én gang.

Velg testmetoden din

- **VIKTIG: Fargeendringsspissen blir umiddelbart rosa for å vise at urinen blir absorbert.**

ELLER

B



URINPRØVE

Start tidtaking av 20 sekunder så snart du ser at fargeendringsspissen blir rosa.

- Hold fargeendringsspissen i urinstrømmen i 5 hele sekunder

ELLER


- **B** Senk bare spissen ned i en urinprøve, tatt i en ren, tørr beholder, i 20 hele sekunder.

- Dersom fargeendringsspissen ikke blir helt rosa, skal du se spørsmål 7.
- Sett på hetten og legg testpinnen flatt ned.
- Start tidtaking.

3
minutter

VENT I 3 HELE MINUTTER før du leser av resultatet

3 Les av resultatet

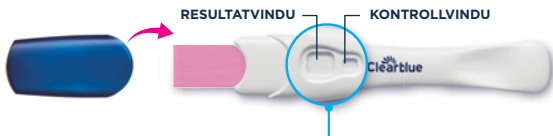

IKKE GRAVID



Bilde A

HVIS DU SER TO STREKER ER DU GRAVID



Bilde B



Bilde C



Bilde D

DET SPILLER INGEN ROLLE HVOR SVAKE
ELLER MØRKE STREKENE ER.

- En strek i kontrollvinduet kan begynne å vises raskt, men du **MÅ** vente i 3 minutter før du leser av resultatet ditt. Hvis du ikke ser en blå strek i kontrollvinduet har ikke testen fungert (se spørsmål 8).

- Hvis resultatet ditt er «Ikke Gravid», skal du se spørsmål 4.
- Hvis resultatet ditt er «Gravid», skal du se spørsmål 3.
- Hvis du fortsatt er usikker på resultatet, skal du se spørsmål 9.

VIKTIG! Les av resultatet ditt innen **10 minutter** etter at du tok testen. Se bort fra alle endringer av resultatet ditt etter dette tidspunktet.

1 Hvordan fungerer Clearblue?

Når du er gravid produserer kroppen din graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin). Denne testen kan detektere veldig små mengder av hCG i urinen din (følsomheten til denne testen er 10 mIU/ml).

2 Når kan jeg teste med Clearblue Ekstra Tidlig?

Du kan teste opptil 6 dager før uteblitt menstruasjon, som er 5 dager før forventet menstruasjon. Hvis du tester før forventet menstruasjon og får resultatet «Ikke Gravid», er det fortsatt en mulighet for at du kan være gravid. Se tabellen nedenfor for resultater av laboratorietester med tidlige graviditetsprøver.

Tidlig testing	
Antall dager før forventet menstruasjon	% av prøvene fra gravide kvinner som ga resultatet «Gravid»
0	>99 %
1	>99 %
2	>99 %
3	>99 %
4	96 %
5	79 %

3 Testen min sier at jeg er «Gravid». Hva skal jeg gjøre?

Du bør snakke med legen din som kan gi deg råd om hva du bør gjøre videre.

4 Testen min sier at jeg er «Ikke Gravid», men jeg tror fortsatt at jeg kan være det. Hva skal jeg gjøre?

Du er kanskje ikke gravid, eller nivået av hCG er kanskje ikke høyt nok til å påvises ennå, eller du har feilkalkulert dagen for forventet menstruasjon. Hvis du testet tidlig kan du teste igjen når du forventer menstruasjonen. Hvis menstruasjonen din er forsinket, kan du teste igjen om 3 dager. Hvis denne testen viser «Ikke Gravid»-resultat og du fortsatt ikke har fått menstruasjon, ta kontakt med legen din.

5 Jeg har tidligere fått «Gravid»-resultat på testen, men testet igjen og fikk «Ikke Gravid»-resultat etter menstruasjonen startet. Hva betyr dette?

Selv om testen er over 99 % nøyaktig i detektering av graviditetshormonet fra dagen du forventet menstruasjonen, er det mulig å få et gravid-resultat og finne ut senere at du ikke er gravid (dvs. du kan få et ikke gravid-resultat senere, eller menstruasjonen kan starte). Dette kan komme av naturlig svangerskapsavbrudd i tidligere stadier av graviditeten, kjent som tidlig spontanabort, som dessverre ikke er uvanlig, da omtrent 1 av 4 graviditeter ender med tidlig spontanabort. Hvis du får uventede resultater, skal du spørre legen din om råd.

6 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?

Hvis du går på medisiner, skal du alltid lese legemiddelproduzentens instruksjoner før du tester.

Medisiner som inneholder hCG kan påvirke resultatet. Svangerskap utenfor livmoren og dersom du nylig har vært gravid, selv om svangerskapet ikke ble fullført, kan føre til misvisende resultater. Hvis du er i, eller nærmer deg menopause, kan du få et falskt gravid-resultat selv om du ikke er gravid. Testen bør ikke bli påvirket av hormonterapi som inneholder klomifensitrat, smertestillende, alkohol, antibiotika eller p-piller. Hvis du får uventede resultater, bør du snakke med legen din.

7 Da jeg tok testen, ble ikke fargeendringsspissen helt rosa. Hva skal jeg gjøre?

Det kan hende at du ikke har påført nok urin, men dersom den blå streken i kontrollvinduets vises innen 10 minutter etter du testet, har testen fungert. Dersom det ikke vises en blå strek i kontrollvinduets innen 10 minutter etter du testet, bør du se spørsmål 8.

8 Jeg har tatt testen, men ingen blå strek har dukket opp i kontrollvinduets. Hva skal jeg gjøre?

Hvis det er mer enn 10 minutter siden du testet, har ikke testen virket. Dette kan skyldes én av følgende:

- Fargeendringsspissen ble ikke holdt pekende nedover eller testpinnen ble ikke lagt flatt etter påføring av urin.
- For mye eller for lite urin ble brukt.

Test igjen med en ny testpinne og sørg for å følge instruksjonene nøye. Det kan være en idé å ta en urinprøve og teste ved bruk av «innsamlet prøve»-metoden.

9 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?

Se bildene under delen «Les av resultatet».

Bilde A:

Resultatet ditt er «Ikke Gravid». Hvis du fortsatt tror du kan være gravid, skal du se spørsmål 4.

Bildene B-D

Resultatet ditt er «Gravid». Det kan variere hvordan streken i resultatvinduets ser ut, men det er fortsatt resultatet «Gravid», uansett hvor svak eller mørk den er.

Bilde B: Dette er mer sannsynlig når du tester før forventet menstruasjon, når hCG-nivåene dine kan være relativt lave.

Bilde C: Dette er typisk når du tester på eller rundt den dagen menstruasjonen er forventet.

Bilde D: Dette er mer sannsynlig at kan skje når du tester mer enn noen få dager etter at menstruasjonen var forventet, ettersom hCG-nivåene er høyere.

Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt skal du vente i minst 3 dager før du tester igjen, og følge instruksjonene nøye.

www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Din samtale vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

800 10 218

Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Vennligst oppgi partinummet fra produktforpakningen.

For veien videre, informasjon og generelle råd knyttet til spørsmål om graviditet, kan du besøke vårt nettsted: www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.
Clearblue er et varemerke for SPD.
© 2019 SPD. Med enerett.

2300438.04 09-2019

Til selvtesting hjemme.
Kun til *in vitro*-diagnostisering.
Ikke til innvortes bruk.
Må ikke brukes om igjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares mellom 2 og 30 °C.
La den nå romtemperatur i 30 minutter.
før testing hvis den oppbevares i kjøleskap.
Ikke bruk hvis foliepakningen er skadet.
Må ikke brukes etter holdbarhetsdato.
Kast med vanlig husholdningsavfall.

	Produsent		Må ikke brukes om igjen
	Partinummer		Medisinsk enhet til <i>in vitro</i> -diagnostisering
	Holdbarhetsdato		Temperaturgrense 2-30 °C

CE
0123

